




### STEP 1

Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.

---

### PASO 1

Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en la punta de los dedos, permitiendo que las bandas cuelguen libremente por debajo de su mano.

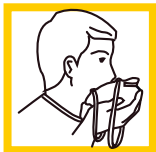

### STEP 2

Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose.

---

### PASO 2

Presione el respirador firmemente contra su cara con la pieza nasal en el puente de su nariz.



### STEP 3

Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the bottom band over the head and position below your ears.

---

### PASO 3

Estirar y colocar la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y posicónela debajo de tus orejas.



### STEP 4

Using both hands, mold nosepiece to the shape of your nose.

---

### PASO 4

Usando ambas manos, moldee la pieza nasal a la forma de su nariz.



### STEP 5

To test fit: **a)** Cup both hands over the respirator being careful not to disturb position, and **b)** Inhale vigorously. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension for better fit. Please carefully follow these fitting instructions during each use to achieve proper fit.

---

### PASO 5

Para probar el ajuste: **a)** Coloque ambas manos sobre el respirador teniendo cuidado de no alterar la posición, y **b)** Exhalar vigorosamente. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes, vuelva a colocar las correas o ajuste la tensión de la correa para un mejor ajuste. Siga cuidadosamente estas instrucciones de montaje durante cada uso para lograr un ajuste adecuado.