

STEP 1

Hold respirator in your hand as shown, with the left hand holding the left strap and the right hand holding the right strap.

PASO 1

Sostenga el respirador en su mano como se muestra, con la mano izquierda sosteniendo la correa izquierda y la mano derecha sosteniendo la correa derecha.




STEP 2

Place the respirator over the nose, mouth and chin. Pull the left and right strap so that the top of the strap goes above the ear and the bottom of the strap goes below the ear. Hold the non-removable hook, which you will find attached to the right strap, and hook onto the left strap on the back of the head for a proper fit. There are 3 hook slots to choose depending on your head size.

PASO 2

Coloque el respirador sobre la nariz, la boca y la barbilla. Tire de la correa izquierda y derecha para que la parte superior de la correa vaya por encima de la oreja y la parte inferior de la correa vaya por debajo de la oreja. Sujete el gancho no extraíble que encontrará en la correa derecha e inserte la correa izquierda. Hay 3 ranuras de gancho para elegir en función de su tamaño de la cabeza.

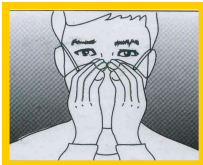

STEP 3

Cup both hands over the mask, checking for tightness, exhale sharply, negative pressure should be felt in the mask, Re-adjust as necessary.

PASO 3

Colóque ambas manos sobre la máscara, verificando el ajuste, exhalando bruscamente, las presiones negativas deberían sentirse en la máscara, Reajuste según sea necesario.