

N95-NIOSH Approved Particulate Respirator *Nuisance Level OV-AG Relief**

GERSON® 1735



N95-NIOSH Approved Particulate Respirator *Nuisance Level OV-AG Relief**



GERSON®
Leading the Way

20
CUPPED/NESTED

Respirator Fitting Instructions: Instrucciones para el uso de Respiradores:

NOTE: Before issuing any respirator to be worn, a face fit test must be performed. See OSHA regulation 1910.134.

NOTA: Antes de colocarse cualquier respirador a ser utilizado, deberá seguirse una apropiada prueba de ajuste del respirador a la cara, de acuerdo a las regulaciones de OSHA 1910.134.

1. Hold the respirator in hand with nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand.




2. Press the respirator firmly against your face with the nose-piece on the bridge of your nose.

3. Stretch and position the top band high on the back of your head. Stretch the bottom band over the head and position it below your ears.

4. Using both hands, mold the metal nosepiece to the shape of your nose.

5. To test fit cup both hands over the respirator and exhale vigorously. If air flows around your nose, tighten the nosepiece, if air leaks around the edges, reposition the straps for a better fit.

6. Remember, careful observance of these fitting instructions is an important step in safe respirator use.

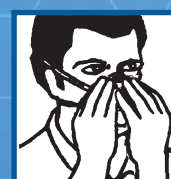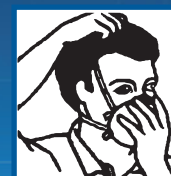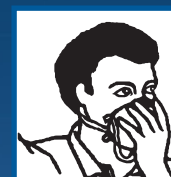

1. Coloque el respirador en la mano con la parte que cubre la nariz hacia los dedos, y dejando que los elásticos de ajuste cuelguen sueltos por debajo de su mano.

2. Coloque el respirador firmemente contra su cara, con la parte que cubre su nariz apoyada contra su tabique nasal.

3. Coloque el elástico superior de ajuste sobre la parte posterior y superior de la cabeza. Pase el elástico inferior por encima de la cabeza y ajústelo por debajo de sus orejas.

4. Use ambas manos para ajustar la banda metálica al tamaño de su nariz.

5. Revise el ajuste colocando ambas manos sobre el respirador y sople fuertemente. Si siente que sale aire alrededor de la nariz, ajuste la banda metálica; si siente la fuga por los bordes, ajuste los elásticos.

6. Recuerde que la observación cuidadosa de estas instrucciones es un importante paso para el uso seguro del respirador.

* Gerson recommended for relief against the irritating effects of nuisance levels of organic vapor or acid gas. This product does not provide lung protection from organic vapors or acid gases. Nuisance level refers to concentrations not exceeding OSHA PEL or applicable government occupational exposure limits, whichever is lower.