

USER'S INSTRUCTIONS

MYCO Medical Supplies, Inc.
N95 Respirator

MYTN01-11 (Medium)
MYTN01-12 (Small)

MYCO Medical Supplies, Inc.
2015 Production Drive, Apex, NC 27539
USA
TEL : +1-919-460-2535

TN01PL371Ulc
[Rev. c] 06/10/2020

USER'S INSTRUCTIONS

WARNING!

This respirator is intended to be worn to protect healthcare personnel from the transfer of microorganisms, body fluids and particulate material, however the risk concerning sickness or infection is not completely avoidable. Failure to read and follow all warnings and instruction will reduce respirator performance and may result in sickness and / or death. Before using, please read use instruction.

[USE INSTRUCTION]

This respirator does not supply oxygen and must not be used in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.

Use for protection against particulate aerosols free of oil.

Do not use for gasses, vapors, asbestos, paint spray or any oil-based aerosols environments.

Before occupational use of this respirator a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training, and fit testing.

Leave the use environment immediately in the case of dizziness, nausea, breathing difficulty or other symptoms of physical distress.

Don a new respirator if a proper fit cannot be obtained, if breathing becomes difficult, or the respirator becomes damaged. Only for single use.

Store unused respirators in a clean, cool, dark, dry place.

S-[SPECIAL OR CRITICAL USER'S INSTRUCTIONS]

These MYTN01-11 and MYTN01-12 filtering face piece respirators" have been manufactured by Approval Holder San-M Package Co., Ltd. for MYCO Medical Supplies, Inc. under TC-84A-3348.

警告!:

このマスクは、医療従事者を微生物、体液、粒子状物質から防護するために着用しますが、病気や感染にかかるリスクを完全に回避することはできません。使用方法を誤ると病気または死に至る可能性があります。ご使用前に必ず、「使用上の注意」を読んでください。

[使用上の注意]

このマスクは酸素を供給するタイプではありませんので、酸素濃度が 19.5%以下の場所では使用しないでください。

油脂を含まない微粒子エアロゾルに対して使用してください。

有害なガス、アスベスト、ペイントスプレー、油脂を含むエアロゾルが発生している場所での使用はしないでください。

この呼吸保護具を職業上の使用の前に、書面による呼吸保護プログラムを地方政府の要求事項に満たすように実施しなければならない。米国では、雇用者は、医療評価、訓練、フィットテストを含む OSHA 29 CFR 1910.134 を遵守しなければならない。

めまい、吐き気、呼吸困難になった場合や身体的な疲労症状がでた場合には、作業環境から直ぐに離れてください。

適切にフィットしない、呼吸が苦しくなった、マスクが破損した、血液または体液で汚れた場合には、新しいマスクに交換してください。

マスクは再使用しないで下さい。


未使用のマスクは、乾燥した清潔な冷暗所に保管してください。

この製品は、認証取得者である San-M Package Co. Ltd. が認証番号 TC84A-3348 において MYCO Medical Supplies, Inc. 向けに製造したものです。

FITTING INSTRUCTION



1. Separate mask to open.

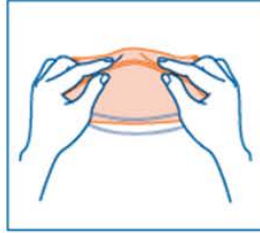

2. Bend the nosepiece to conform mask to your nose.



3. Hold the center of headbands separately.



4. Hang the lower part on your chin and bring both bands over your head.



5. Place the upper band at your crown and the lower band at your neck.



6. Form the nosepiece tightly to your face.