


# INSTRUCCIONES DE AJUSTE/*FITTING INSTRUCTIONS*



Sostenga el respirador en la mano como se muestra en el diagrama, con la mano izquierda sostenga la banda izquierda y derecha con cada una de sus manos. Hold respirator in your hand as shown, with the left hand holding the left strap and the right hand holding the right strap.

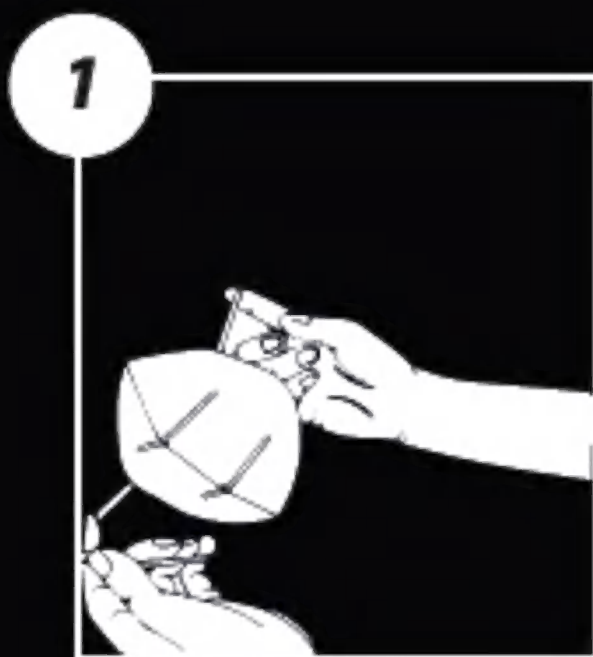

Coloque el respirador sobre la nariz, boca y mentón. Hale la banda izquierda y derecha dirigiéndolas detrás de las orejas. Sostenga el gancho no removible para ajustar la banda derecha adecuadamente. Dependiendo del tamaño de la cabeza puede elegir entre tres niveles de graduación.

Place the respirator over the nose, mouth and chin. Pull the left and right strap so that the top of the strap goes above the ear and the bottom of the strap goes below the ear. Hold the non-removable hook, which you will find attached to the right strap, and hook onto the left strap on the back of the head for a proper fit. There are 3 hook slots to choose depending on your head size.



Prueba de ajuste:

a) Cubra con las dos manos la superficie del respirador cuidando no desajustar el respirador.

b) Inhale vigorosamente. Si el aire se escapa de los bordes, reposicione las bandas de ajuste o tensiónelas utilizando la pieza de graduación para un mejor ajuste.

To test fit:

a) Cup both hands over the respirator being careful not to disturb position, and

b) inhale vigorously. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension for better fit.